

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保存してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル フットスパ深型の補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP13～P14に従ってご確認いただき、なお異常がある場合、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365** ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048
札幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365** パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間など変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

National

一般家庭用

フットスパ^{ふかがた}深型

EH283

取扱説明書



効能・効果

あんま・
マッサージの代用

疲労の回復
血行の促進
筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす
神経痛・筋肉痛の
痛みをやわらげる

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意(1～3ページ)」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

(保管用)

(保証書別添)

医療用具許可番号
25BY0008

EMC
IEC60601-1-2:1993

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


⚠ 警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)

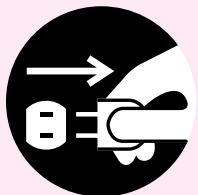

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



必ず守る

医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人には必ず医師と相談してください。
● 悪性腫瘍のある人 ● 知覚障害のある人 ● 足に発疹がある人
● 妊娠中や生理中の人 ● 足に静脈炎がある人 ● 糖尿病の人
● 安静を必要とする人 ● 足に静脈瘤がある人
● 心臓に障害のある人 ● 足に傷口がある人
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

次のような方は使用しない。
● 温度や痛みの感覚の弱い人 ● 自らの意志で足を動かさない人やけどのおそれがあります。

足浴およびマッサージ以外の目的では使用しない。
事故やけがのおそれがあります。

AC100V以外の電源で使用しない。
火災や感電のおそれがあります。

コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート・発火のおそれがあります。

子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
乳幼児には使用しない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

コンセント(テーブルタップを含む)の近くで本体を使用しない。
水滴が飛散して感電のおそれがあります。

お湯をあふれさせながら使用しない。
感電やショートのおそれがあります。



水場使用禁止

風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。
絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

改造しない。修理技術者以外の人には分解・修理しない。
発火や異常動作してけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
火災や事故のおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

コードを傷つけたり、加工したりしない。
無理に曲げたり引張ったり、ねじったり、
重い物をのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電のおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
感電や発火のおそれがあります。

足浴槽内で立ち上がらない。
事故やけがのおそれがあります。

通電したまま放置しない。
火災のおそれがあります。

本体は流水洗いやつけおき洗いはしない。
事故やけがのおそれがあります。



ぬれ手禁止

プラグはぬれた手で抜き差しをしない。
感電やショートのおそれがあります。



必ず守る

使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を
感じた場合は使用を中止する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

足浴およびマッサージは1回15分以内にする。
長時間の連続使用は逆効果です。

必ず上・下限線の間にお湯を入れて使用する。
湯量が少ないと足浴槽壁面が高温となり、やけどのおそれがあります。
また、湯量が多いと水もれのおそれがあります。

使用後は本体内のお湯を必ず捨てる。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

コンセントから抜くときはプラグをもって抜く。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

足浴槽の壁面は湯温より高温になるため、
足を壁面よりはなし、やけどに注意する。
守らないとやけどのおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意

1

各部のなまえ

5

使いかた

7

使い終わったら

9

お手入れについて

12


こんな異常を感じたら

13

保証とアフターサービス

裏
表
紙


各部のなまえ

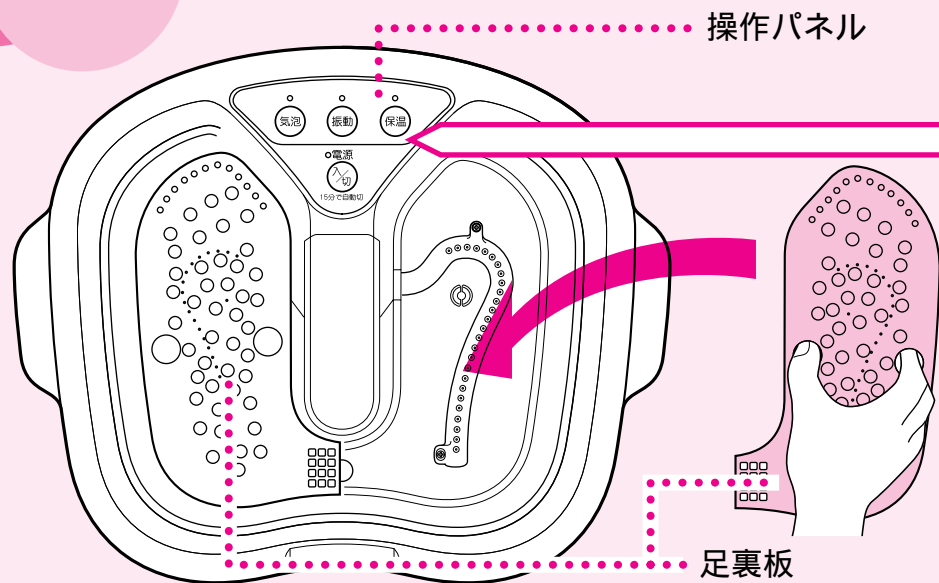

上限線
下限線

足浴槽


(丸い突起が多数ある面を上にして
足浴槽底部に軽く押してセットする
必ずセットして使用する。)

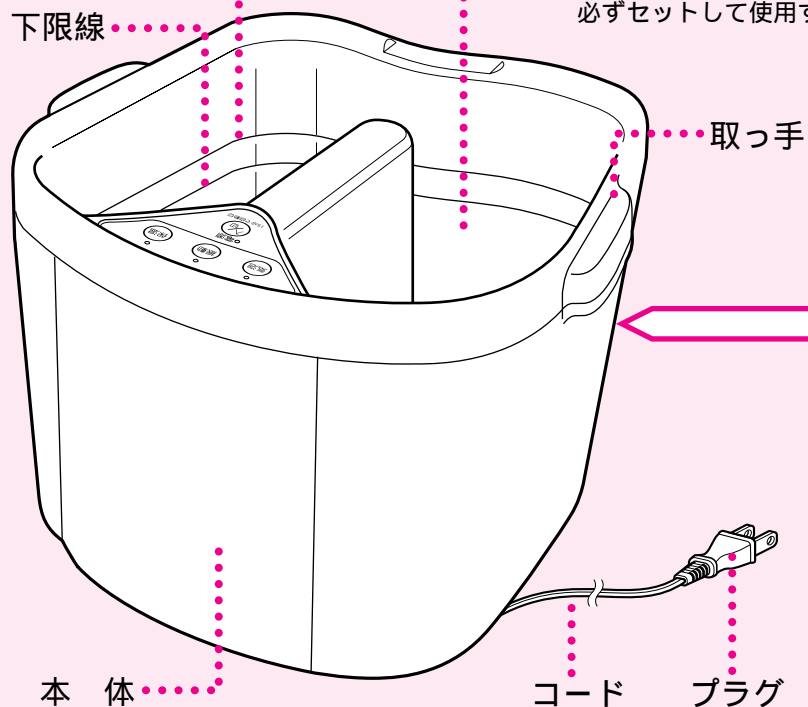

操作パネル



気泡ボタン 振動ボタン 保温ボタン

電源ボタン
内蔵タイマーにより
約15分で電源は
自動的に切れます。
(プラグを差し込んで
約3秒間は「入」にできません。)

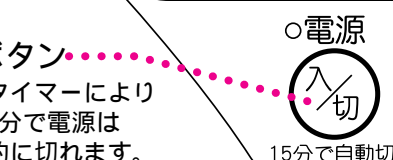


保温性能
約42℃になるようマイコン制御されます。
ただし、入れるお湯の温度や足の温度および室温により湯温が一定になるまでの時間は異なります。

排水栓(本体背面)

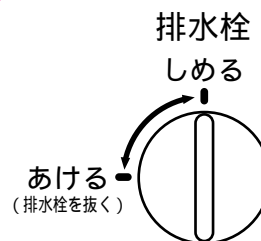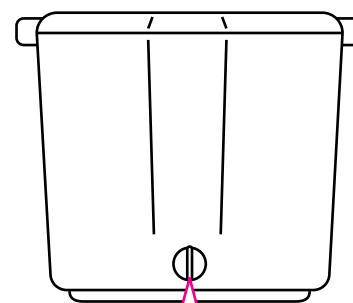


付属品

コード収納具

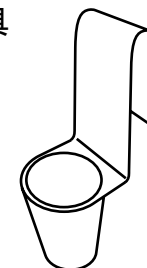

足浴湯温目安計

本商品以外に
使用しない。
10～60℃の範囲を超え
るご使用、保管はしない。
●ガラス管が破裂します。
落としたり、ぶつけたり
しない。
●液切れします。

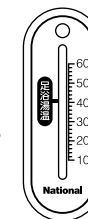

P13参照

使いかた

ご使用の前に



- 1 足拭き用のタオルと床をぬらさないためのバスタオル等を
用意する
- 2 本体の下にバスタオル等を
敷く
- 3 排水栓がしまっていることを確認し
足浴槽にお好みの温度の
お湯を入れる
付属の目安計で確認しながら、
42が目安。
高いとやけどのおそれがあります。
60以上の高温の湯を入れると
故障の原因になります。
湯量は約7リットル

操作パネルにお湯をかけないでください。
故障の原因になります。

- 4 プラグをコンセントに
差し込む
プラグはぬれた手で差し込まない。

- 5 電源ボタンを
押す

電源ランプが点灯します。
電源ボタンを押してから約15分で自動的に切れます。

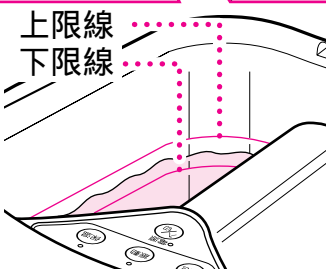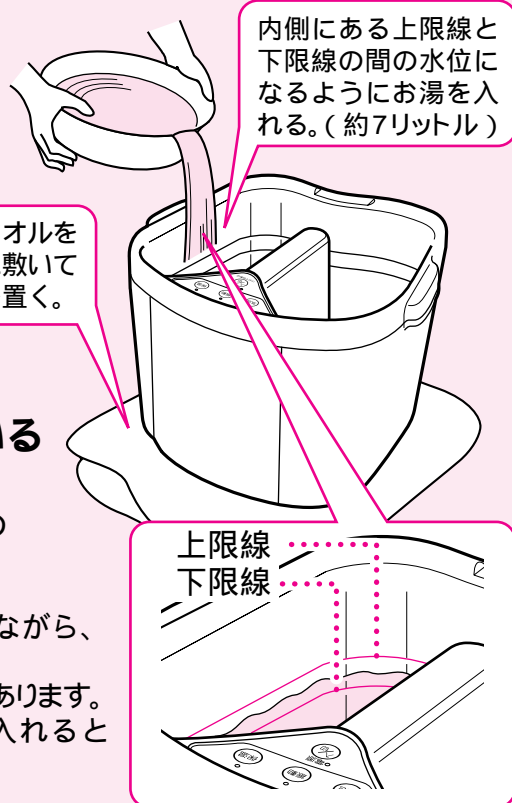

お湯を入れすぎた場合は、
カップ等ですくい取って捨
てるようにしてください。
P10参照
排水栓を抜いて湯を減らさ
ないでください。(湯が勢いよ
く飛び出すため)

ご使用方法

* イスに座って使用する。

足浴およびマッサージは1回
15分以内にする。長時間の
連続使用は逆効果です。

- 1 お湯が熱くないことを確認してから足を足浴槽に
入れる
足を入れたとき、水面は1～2cm上昇します。
気泡使用時、水滴の飛散がある場合は
湯量を減らしてください。
- 2 保温ボタンを
押す
- 3 お好みにより振動ボタン・気泡ボタンを
押す
振動と気泡は同時に使用できます。
- 4 約10分間
足浴槽に足を入れる
足浴槽の壁面は湯温より高温になります。
足をはなし、やけどに注意してください。
湯温が熱く感じたら保温ボタンを押し保温ヒーターを切ってください。
ぬるく感じたときは足を出して、少し熱めのお湯をたしてください。
(上限線を越えないように湯量を調整してください。)
足浴槽内で立ち上がらないでください。

入浴剤やアロマオイルを入れて、楽しむことができます。

* 入浴剤を入れる場合は
入れすぎないでください。
入浴剤はご家庭のお風呂と同じ割合で溶かして使用してください。
(目安は足浴槽の水位線のお湯(約7リットル)に入浴剤を約1g(小さじ一杯)
の割合で入れる。)
泡のでるタイプは使用しないでください。
泡立ちにより操作パネルをぬらし、故障の原因になります。



使い終わったら

＊使用後、お湯は必ず排水栓から捨てる。


1 電源ボタンを押し、電源を切り プラグをコンセントから抜く



2 排水する場所へ本体を運ぶ

お湯が入った状態で、総重量は約11kgになります。運べない場合は右ページを参照してお湯を捨ててください。

排水栓を抜いたときは、水が勢いよく飛び出すので、風呂場や流し台等、飛び出しても支障のない場所へ運ぶ。

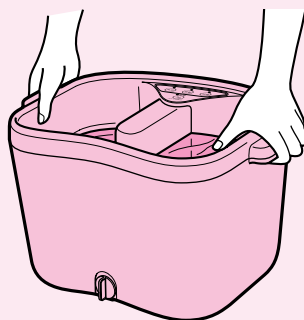


3 排水栓を抜く

排水栓以外からお湯を捨てると、操作パネル部をぬらし、本体の中に水が入り故障の原因になります。排水栓や排水口を傷つけたり、ゴミを付着させない。水もれのおそれがあります。排水後は排水栓を必ず取りつける。




本体が重くて運べない場合

適当なカップ等でお湯をすくいバケツに移して捨てる

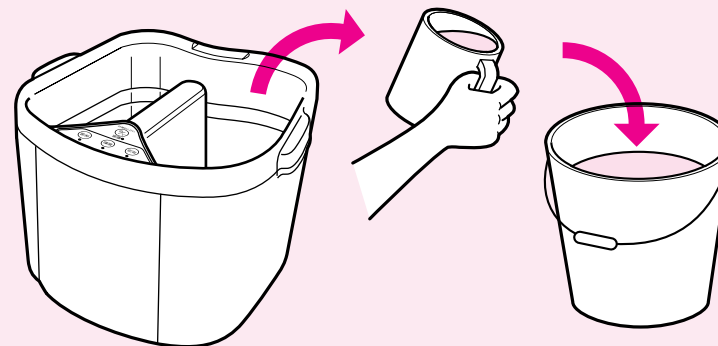

ハンドポンプ等でお湯をバケツに移して捨てる
ストーブの給油用と兼用しない。

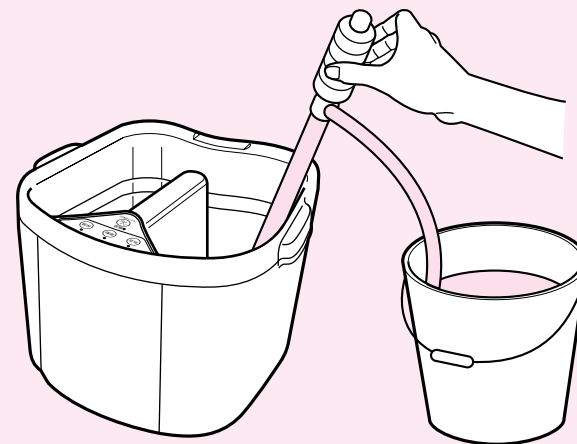


他にバスポンプ(お風呂のお湯を洗濯機に移し替える)を使う方法もあります。


使い終わったら

足裏板をはずし、槽内に残ったお湯と足裏板に付いたお湯をタオル等でふきとる。

足裏板の穴に指を入れて引き上げると取れます。

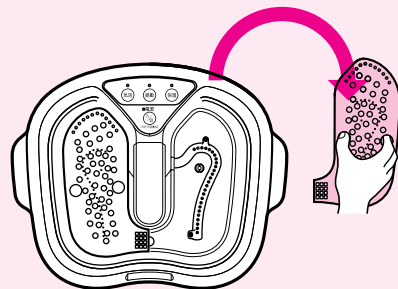

コードはコード収納具に納め、本体に付ける

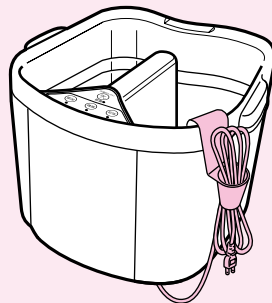

子供が触れない所に保管する



お願い

樹脂製の床面(フロアパネル等)に長期間放置しないでください。床面がよごれたり、跡が残る場合があります。

お手入れについて

本体は流水洗いやつけおき洗いをしない。
また熱湯消毒はしない。



故障や変形のおそれがあります。

お湯を湿らせた布でふき取る。

操作パネルにお湯や水をかけない。



足裏板が汚れた場合は、
本体から取り出し、
流水洗いか、つけおき洗いを
する。

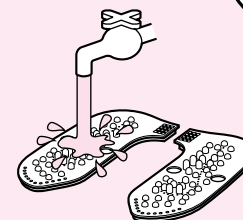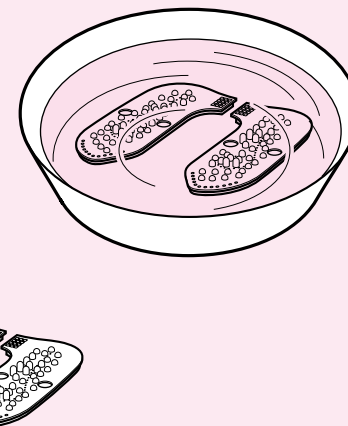

本体、足裏板、付属品のお手入れに
シンナー・ベンジンなどは絶対に
使わないでください。

変色・劣化およびヒビが入る
おそれがあります。



禁止



こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
使用途中で本体の動作が停止した	▶ 内蔵タイマー(約15分)が作動した	必要に応じ再度、電源ボタンを押す
電源ボタンを押しても通電しない	▶ プラグが正しくコンセントに差し込まれていない	▶ プラグをコンセントに正しく差し込む
気泡が発生しない	▶ お湯を入れすぎている(水位が上限線を越えている)	▶ お湯を捨て、水位を上・下限線の間になるようにする ◀ P7参照 ▶ P10参照
	▶ 気泡ポンプにお湯が逆流している	▶ お湯を排水し、1分程度気泡ボタンをオンにする
操作パネルの全てのランプが点滅する	▶ ノイズ等によるマイコンストップモード	▶ プラグを抜き、数秒待ち再度プラグをコンセントに差し込む
水もれする	▶ 排水栓がしまっていない	▶ 排水栓をしめる
	▶ 排水栓や排水口にゴミが付着している	▶ ゴミを取り除く
	▶ お湯を入れすぎている(水位が上限線を越えている)	▶ お湯を捨て、水位を上・下限線の間になるようにする ◀ P7参照 ▶ P10参照
足浴湯温目安計が液切れしている(液が途中で切れている現象)	▶ 落したり、ぶつけたりした高温にさらされた	▶ ゴム板などの柔らかい物の上で軽くトントンと叩く 
コード、プラグが異常に熱い		

点検後なお異常がある

ただちに使用中止

お願い

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

警告

絶対に改造・分解・修理しない
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
販 売 名	フットスパ深型 EH283
消 費 電 力	280W
電熱装置の消費電力	260W
類 別	器具器械(77)パイプレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器

医療用具許可番号	25BY0008
許 可 年 月 日	2001年6月6日
本体寸法・標準湯量	幅41×奥行35×高さ29(cm) 約7L
質 量 (重 量)	約4.5kg
輸 入 販 売 元	松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地